

Solido 3

Mesa auxiliar universal



Paciente

- Inclinación opcional para leer
- Permanencia más agradable en la cama



Personal

- Control sencillo de la mesa
- Manejo ergonómico de la mesa



Administración

- Diseño moderno con distintos colores opcionales
- Altamente funcional y a un precio asequible



Solido 3

La mesa auxiliar o atril Solido 3 es un práctico accesorio que hace más agradable la permanencia del paciente en la cama. Dispone de una serie de características ergonómicas que facilitan su manejo y lo hacen más intuitivo tanto para el paciente como para el personal de enfermería.

Control sencillo

La mesa auxiliar Solido 3 puede equiparse con un resorte para controlar la elevación sin utilizar el asa de control.

Inclinación práctica

La mesa auxiliar está equipada con un tablero inclinable para comer, que también permite a los pacientes leer o usar una Tablet.

Control ergonómico

Gracias a sus características ergonómicas y a la estructura especial de la columna, el manejo de la mesa es muy fácil.

- 1 El asa permite manejarlo fácilmente.
- 2 Gracias al mayor espacio disponible, el paciente puede acercarse aún más a la mesa, lo que le permite comer más fácilmente.
- 3 Ajuste extremadamente sencillo de la altura de la mesa con una palanca.
- 4 El tope integrado evita que los libros u otros objetos se caigan, incluso cuando se inclina el tablero para comer.
- 5 El práctico soporte metálico sirve de tope para los elementos colocados en la mesa.






Práctico accesorio de sujeción

La peculiar forma de la columna le permite montar un accesorio de sujeción desplazable verticalmente. A dicho accesorio de sujeción pueden fijarse distintos elementos: un soporte para botellas de agua, un gancho para el recipiente de orina, un estante pequeño para un teléfono, etc. De esta forma el paciente siempre tendrá a mano todo lo que necesita..



Diseño: funcionalidad y estética

El tablero para comer cuenta con líneas sencillas que facilitan su limpieza y se fabrica en diferentes colores. De esta forma, el color del tablero se puede adaptar al de la cama y al de los elementos de la habitación

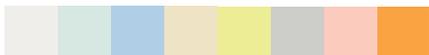

Detalles útiles

- La columna lisa, la tecnología sin soldaduras y el práctico diseño de la estructura facilitan la limpieza de la mesa en forma de T.
- El chasis inferior en forma de T se puede guardar fácilmente debajo de la cama, incluso en el caso de que haya una quinta rueda pivotante.
- Elija entre las siguientes opciones:
 - Chasis inferior de poca separación con dos pequeñas ruedas pivotantes integradas.
 - Chasis inferior en forma de C con dos ruedas pivotantes más grandes, de 50 o 75 mm, lo que facilita el movimiento de la mesa y su mantenimiento.
- Capacidad de carga de la mesa de 30 kg.



Parámetros técnicos

Dimensiones internas del tablero	Parte fija	11×35 cm
	Parte coloreada	64×35 cm
Dimensiones externas del tablero		94,5×45 cm
Ajuste de la altura (depende de las ruedas pivotantes y el chasis inferior)	Chasis en forma de C y ruedas de 50 mm	103×71 cm
	Chasis en forma de C y ruedas de 75 mm	104,5×72,5 cm
	Chasis inferior en forma de T	102×70 cm
Capacidad de carga	En el medio del tablero	30 kg
Dimensiones del chasis inferior	Chasis en forma de C y ruedas de 50 mm	80,5×44 cm
	T	79,5×43,5 cm
Altura del chasis inferior	Chasis en forma de C y ruedas de 50 mm	11,3 cm
	T	3,4 cm
Ángulo de inclinación		0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°



Members of LINET Group

LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid

Tel.: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72 | email: linetiberia@linet.com | www.linet.com

