


Image 3

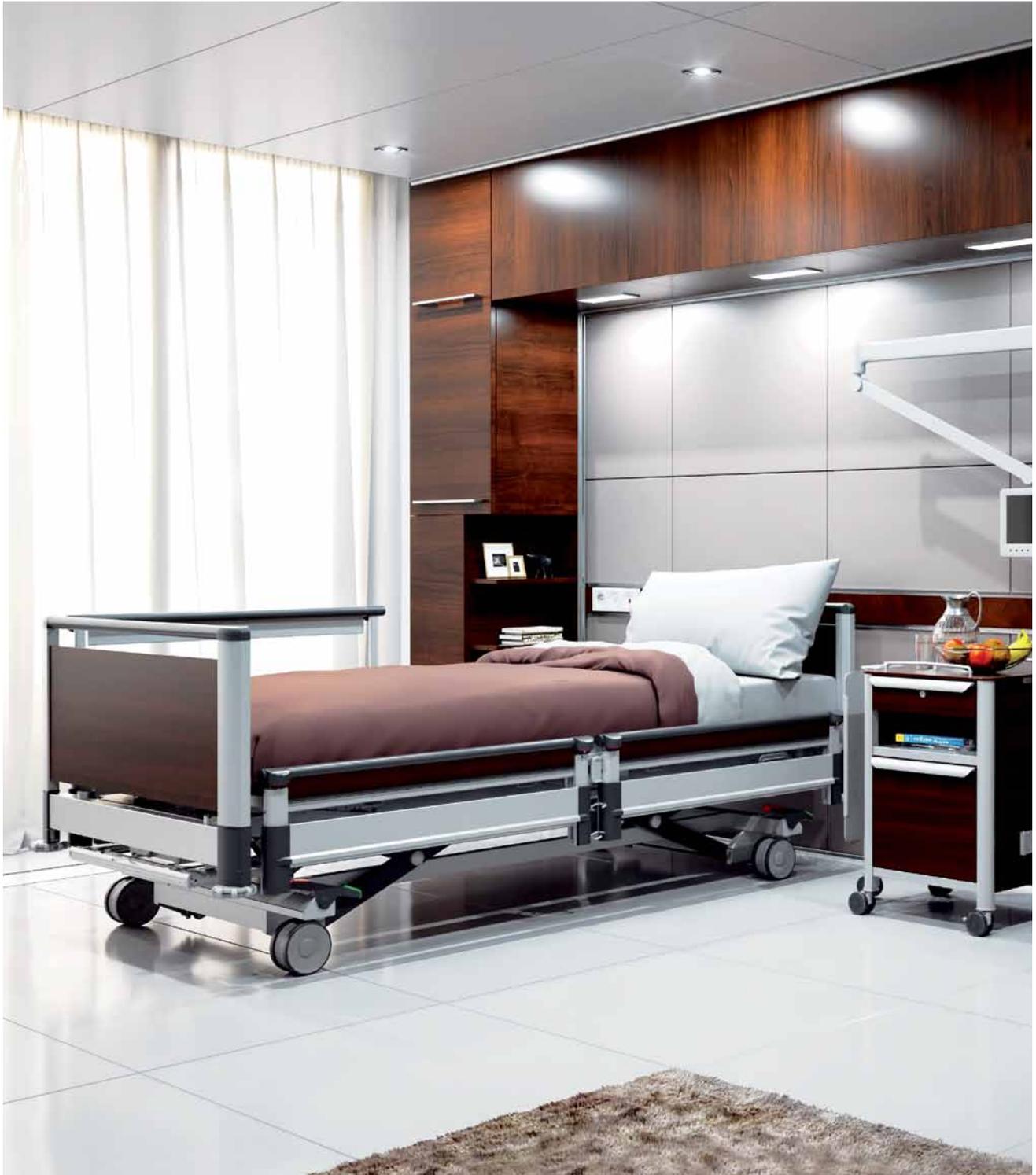

diseño excelente para todas sus necesidades

Image 3

diseño excelente para todas sus necesidades



Image 3 estándar



Image 3 lavable



Image 3 XXL

Ventajas de la cama



Posición de
28_{cm}
muy baja



- Posición extremadamente baja para evitar daños en caídas
- Apoyo para la movilización independiente
- Exclusivo diseño moderno ligado a un alto nivel de comodidad



Paciente

- Ergonomía sofisticada para una manipulación cómoda
- Funciones automáticas predeterminadas
- Fácil higiene de la cama



Personal

- Uso universal: versión estándar, bariátrica o lavable
- Solución versátil para cubrir las necesidades del centro
- Nivel alto de control de infecciones



Administración

Solución para todas las necesidades



Image 3 LAVABLE

La cama está disponible en una versión apta para la limpieza y desinfección en máquinas hospitalarias de lavado automático.

- La estructura de la cama se somete a una modificación tecnológica especial que incrementa su vida útil y su durabilidad.
- La cooperación con Miele durante el desarrollo de la cama garantiza que se trata de una solución fiable comprobada mediante pruebas con criterios estrictos.

LAVABLE
FÁCILMENTE

Image 3 ESTÁNDAR

El moderno diseño de la cama Image 3 le confiere un uso universal en los hospitales. Al elegir la versión, el diseño y los accesorios, puede adaptarse la cama a un propósito específico. Gracias a la versatilidad de su diseño, la cama Image 3 también puede mejorar el nivel de los centros de cuidados.





Image 3 XXL

En su versión bariátrica, la cama Image 3 satisface la creciente demanda de camas con mayor capacidad de carga.

- La cama cuenta con una plataforma más ancha para el colchón
- La capacidad de carga aumenta hasta los 320 kg
- Su estructura y sus accesorios son seguros incluso con cargas mayores

CAMA MÁS ancha
CARGA SUPERior

Un diseño excelente





IMAGE 3

Respeta todos los principios ergonómicos de la atención sanitaria. Sus funciones se ajustan a las necesidades de los especialistas sanitarios y a los requisitos de mayor seguridad de los pacientes. Ofrece un control intuitivo y un funcionamiento fácil y sencillo.

EL DISEÑO DE LA CAMA ES ATEMPORAL

Además, es compatible con una amplia variedad de servicios sanitarios y de cuidados.

COMBINACIÓN ELEGANTE CON ALUMINIO

Por otra parte, los toques de madera crean un diseño moderno y relajante.

CONCEPTO CROMÁTICO

Ofrece una gran versatilidad: piezas de metal o plástico en tono plateado o blanco, y paneles laterales en los cabeceros y pieceros con distintas opciones de decoración. Al elegir los colores y la versión de la cama, el centro adquiere un modelo funcional y totalmente personalizado.

DISEÑO
de alta
tecnología



Cama Image 3 con barandillas telescópicas y detalles de aluminio.



Cama Image 3 con cabecero y piecero de plástico y barandillas continuas abatibles.

Pacientes a salvo



La seguridad es un factor clave para la cama Image 3. Todas las funciones de la cama están pensadas no solo para que el paciente se sienta lo más seguro posible, sino para que realmente lo esté.

CONCEPTO
SAFEPlus



POSICIÓN EXTREMADAMENTE BAJA

La altura mínima de la cama puede ser de tan solo 28 cm. Esta función única contribuye a proteger al paciente mientras duerme.



HIGIENE

Gracias a la forma y al material del diseño, tanto la cama como sus elementos estructurales se limpian fácilmente. Esto reduce significativamente la posible aparición o transmisión de infecciones nosocomiales.



ALARMA DE FRENO

Avisa al personal de enfermería de que es necesario frenar la cama para garantizar la máxima seguridad del paciente.



BOTÓN GO

Gracias a este concepto de seguridad patentado, los controles de la cama se bloquean pasados tres minutos de inactividad. Así, se impide que la cama se mueva accidentalmente.

Independencia de movimiento

80
cm



42
cm



28
cm




ESTRATEGIA DE TRES POSICIONES

La altura de la plataforma del colchón puede regularse automáticamente con solo tocar un botón a una posición apta para un descanso seguro, para una cómoda movilización o para realizar tratamientos estándar.

ERGOFRAME®

El sistema de posicionamiento Ergoframe® para la plataforma del colchón reduce significativamente el riesgo de aparición de úlceras por presión. El incremento del espacio en la sensible zona pélvica reduce la acción negativa de la presión y de las fuerzas de cizallamiento.

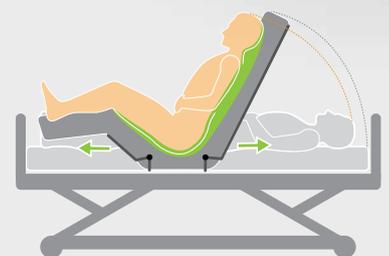

Cama con sistema Ergoframe®



BARANDILLAS SEGURAS

Al poder variar su posición, proporcionan alta protección y apoyo. El apoyo para la movilización facilita la salida de la cama.



Cama estándar



Detalles prácticos

- 1** Quinta rueda
Facilita la manipulación cómoda en todos los espacios.
- 2** Extensión de la cama
Tres niveles posibles según las necesidades individuales del paciente.
- 3** Luz nocturna
Para que el paciente se oriente de forma segura.
- 4** Protectores de esquinas en 3D
Protegen la cama en dirección horizontal y vertical.
- 5** Ancho de la plataforma del colchón
El ancho de la plataforma puede ser de 86 cm o de 90 cm, con piezas de plástico extraíbles.
- 6** Bandeja para la ropa
Puede utilizarse también para guardar el panel de enfermería.
- 7** Posición de CPR mecánica
Para usar en caso de emergencia.



Características eléctricas

Fuente de alimentación	230V/±10%
Entrada máxima	max 1.6A; 370VA
Protección contra agua y polvo	IPX4 (IPX6 para la cama Image 3 lavable)

Certificates

LINET cuenta con la certificación del sistema de calidad y de los estándares europeos: ČSN EN 9001:2000 y ČSN EN 13485:2003.

Los productos se fabrican de acuerdo con los estándares europeos de tecnología médica y camas hospitalarias: ČSN 60601-1, ČSN 60601-2, ČSN 60601-4, ČSN 60601-2-52 y ČSN EN ISO 14941.
Image 3 lavable: AK-BWA:2009





Parámetros técnicos

Parámetros técnicos	Image 3 (estándar y lavable)	Image 3 (XXL)
Dimensiones externas	104x221 cm/99,8x220 cm	110x220 cm
Dimensiones de la plataforma del colchón	200 x 86 / 90 cm	200x100 cm
Espacio inferior	13/15,5 cm	13 cm
Ajuste de la altura de la plataforma del colchón	28 – 80 cm	28 – 80 cm
Extensión de la cama	10, 22 y 30,5 cm	10, 22 y 30,5 cm
Altura máxima del colchón	18 cm (barandilla partida); 17 cm (barandilla continua abatible)	26 cm, incluida la extensión
Carga máxima de seguridad	250 kg	320 kg
Peso de la cama	140 kg, incluidos los accesorios	168 kg, incluidos los accesorios
Inclinación del respaldo	0–70°	0–70°
Inclinación de la sección para las piernas	0–34°	0–34°
Inclinación para posiciones de TR/ATR	0–14°	0–14°

Image 3

Paciente

- Posición extremadamente baja para evitar daños en caídas
- Apoyo para la movilización independiente
- Exclusivo diseño moderno ligado a un alto nivel de comodidad



- Ergonomía sofisticada para una manipulación cómoda
- Funciones automáticas predeterminadas
- Fácil higiene de la cama



Personal

Administración

- Uso universal: versión estándar, bariátrica o lavable
- Solución versátil para cubrir las necesidades del centro
- Nivel alto de control de infecciones



LINET

Members of LINET Group

LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid, Spain

Tel: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72

E-mail: linetiberia@linet.com | www.linet.com | www.wi-bo.com

